

災害時にストーマパウチを 自作する方法



有限会社イースタウン
<http://easttown.co.jp>

用意するもの


1. ファスナー付食品保存用バッグ
2. クリアホルダー（A4用）
3. 両面テープ（幅50mm）
4. 防水フィルム（またはフィルムドレッシング）
5. コンパスカッター
6. ハサミ
7. カッターマット（入手できない場合は厚紙）

このパウチは使い捨てです。
再使用はできません。



1.


クリアホルダーを切り離し、さらに縦方向に半分に切り離します

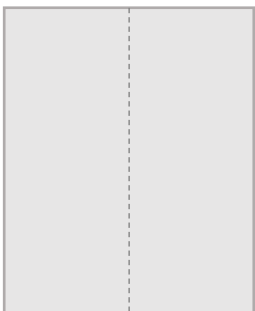


2.

切り離したクリアホルダーの両面の中心に幅50mmの両面テープを貼り付けます。（図A）
両側の部分の裏表にも両面テープを貼り付けます。（図B）
これを均等に三分割します。（図C）



（図A）



（図B）






（図C）

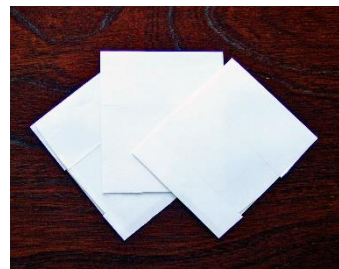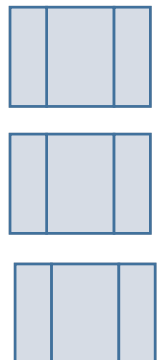


1枚のクリアホルダーから12枚のシートを作ることができます。

3. 切り離れたシートをコンパスカッターで直径8～8.5cm程度に切り抜きます。
 (注) コンパスカッターの中心を固定し、シートを何度も回転させるときれいに切り取ることができます。

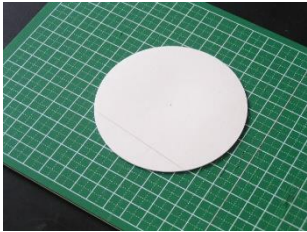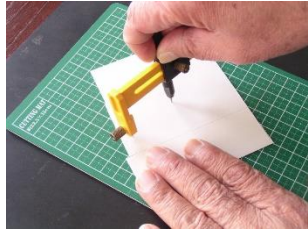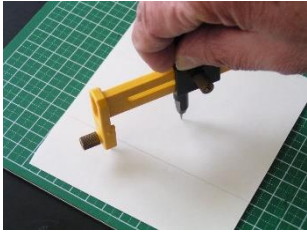


(注) 直径は使用する防水フィルムの幅以内にしてください。

4. 切り抜いたシートの片面のはく離紙をはがし、食品保存バッグに貼り付けます。

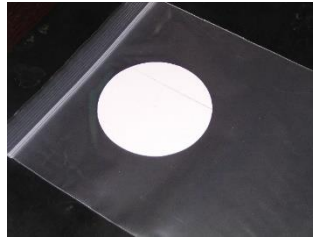

5. 食品保存バッグにカッターマットを挿入し、コンパスカッターでストーマの直径より1cm程度大きな円を切り取ります。

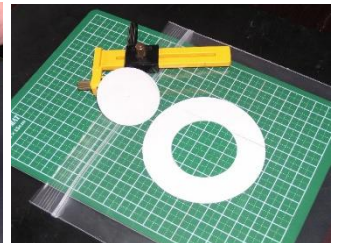


6. 防水フィルムの中央にストーマ径の大きさの穴を切り取ります。



(注) 防水フィルムは角取りをしておくとはがれにくくなります。

7. ドーナツ状にくり抜いたシートのはく離紙をめぐって、防水フィルムを貼り付けて完成です。

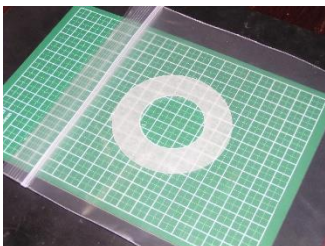

使用上の注意

注1.)

粘着テープは時間の経過とともに粘着力が増します。作ったストーマパウチは少し時間をおいてから使用してください。

注2.)

フィルムドレッシングを使用する場合にはシートのセンターにカッターナイフで剥離線を入れ、シートを半分ずつめくって貼り付けると、シワにならずに貼り付けられます。

フィルムドレッシングは非常に薄いフィルムなのでカバーフィルムが貼られています。

貼り付ける際には必ずカバーフィルムをはがしてください。

